


smiths medical

bringing technology to life



**Lancette de sécurité
Safe-T-Lance® Plus
-Activation par
bouton-poussoir**

Sûre. Confortable. Efficace.

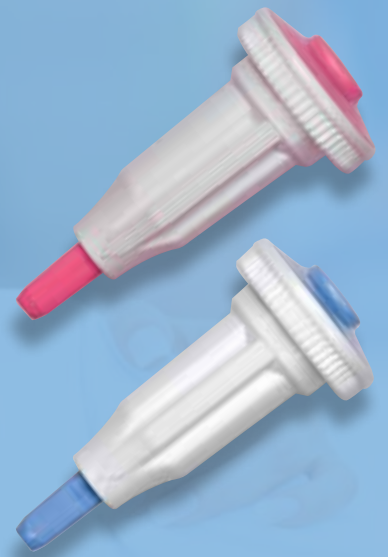

3 ÉTAPES SIMPLES



1. Dévisser le capuchon protecteur, puis le retirer.



2. Positionner fermement le corps de la lancette de sécurité Safe-T-Lance® Plus sur le site de prélèvement et appuyer sur le bouton-poussoir pour activer le dispositif.



3. Presser doucement et par intermittence à proximité du site de prélèvement pour obtenir le volume de sang requis.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser si le capuchon protecteur a été précédemment retiré de la lancette. Nettoyer la peau conformément aux procédures de sécurité. Jeter la lancette usagée dans un collecteur pour objets tranchants conformément aux directives de l'établissement et aux réglementations nationales et régionales.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

SÉCURITÉ


- À usage unique
- L'aiguille se rétracte et se verrouille automatiquement
- Prévention des blessures par piqûre d'aiguille et des infections croisées

EFFICACITÉ

- Large gamme de produits - disponible en 6 tailles différentes
- Quantité de sang prélevée adaptée aux différents tests capillaires

CONFORT

- Facile à utiliser, en seulement trois étapes
- Conçue pour contrôler la profondeur de l'aiguille
- Action à double ressort
- Aiguilles revêtues de silicone
- Prise ergonomique pour une manipulation précise

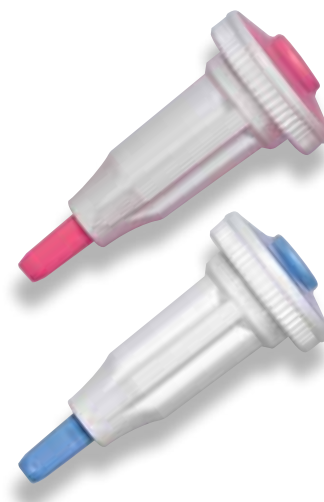

Lancette Safe-T-Lance® Plus

	Pédiatrique 1028-1	1.5mm Lame	1.2mm de profondeur		Débit normal 1014-1	21G Aiguille	1.8mm de profondeur	Conditionnement: 200 unités/boîte, 2000 unités/carton
	Débit max 1005-1	1.5mm Lame	1.6mm de profondeur		Faible débit 1020-1	25G Aiguille	1.4mm de profondeur	
	Débit élevé 1008-1	18G Aiguille	1.8mm de profondeur		Micro débit 1025-1	28G Aiguille	1.6mm de profondeur	

Lancettes de sécurité Safe-T Lance® Plus - Dispositifs médicaux de classe IIa – FABRICANT : HTL-SREFA S.A. (Pologne) – ORGANISME NOTIFIÉ : DEKRA (CE0344) – INDICATIONS : Dispositifs médicaux destinés aux prélèvements capillaires - PRISE EN CHARGE : Pris en charge par l'Assurance Maladie sous certaines conditions. Consultez www.ameli.fr. Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation.

Pour plus d'informations, visiter notre site web www.smiths-medical.com

DOCUMENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ. LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

Distribué par:

Smiths Medical ASD, Inc.
Keene, NH 03431,
Tél: +1-603-352-3812
Appel gratuit aux États-Unis: 1-800-258-5361

Smiths Medical France

3 rue du Pont des Halles
94656 RUNGIS Cedex
Tél: +33 (0)1 58 42 50 00
Email: france@smiths-medical.com

Fabriqué par:

HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków POLAND

Smiths Medical fait partie du groupe mondial de haute technologie Smiths Group plc. Consulter le mode d'emploi/manuel de l'opérateur pour obtenir la liste complète des indications, contre-indications, avertissements et précautions d'emploi. Jelco et le logo Smiths Medical sont des marques commerciales de Smiths Medical. Safe-T-Lance est une marque déposée de HTL-STREFA S.A, utilisée sous autorisation. ©2016 Smiths Medical. Tous droits réservés. SS195429FR-122016

MKEECA-0094

CE
0473 **Rx**
ONLY

smiths medical