

smiths medical
bringing technology to life

Neofuser® Vario

Bærbar elastomerin fusionspumpe flere
hastigheder



SIKKERHED

- Lukket mekanisme giver mindre risiko for kontaminering
- Aftagelig nøgle
- Stabilitet i forbindelse med lægemidler
- Biologisk kompatibilitet
- Hård, gennemsigtig beskyttelsesbeholder
- Latex- og DEHP-fri

ANVENDELIGHED

- Justerbar flowhastighed
- Forskellige reservoirstørrelser
- Volumenindikator, der er let at aflæse
- Selvprimende
- Lavt fyldningstryk
- Bærbart letvægtsprodukt til engangsbrug
- Transporttaske

YDEEVNE


- Nøjagtigt og konsistent flowhastighed
- Minimalt residualvolumen
- Anti-kink slange

OMKOSTNINGER

- Vedligeholdelsesfri
- Strømforsyning eller batteri ikke påkrævet

NEOFUSER® VARIO ER EGNET TIL KEMOTERAPI- OG ANTIBIOTIKABEHANDLING SAMT ALLE OMRÅDER INDEN FOR POSTOPERATIV SMERTEBEHANDLING

- Systemisk smertebehandling
- Kontinuerlig plexusblokade
- Anæstesi til sårinfiltration

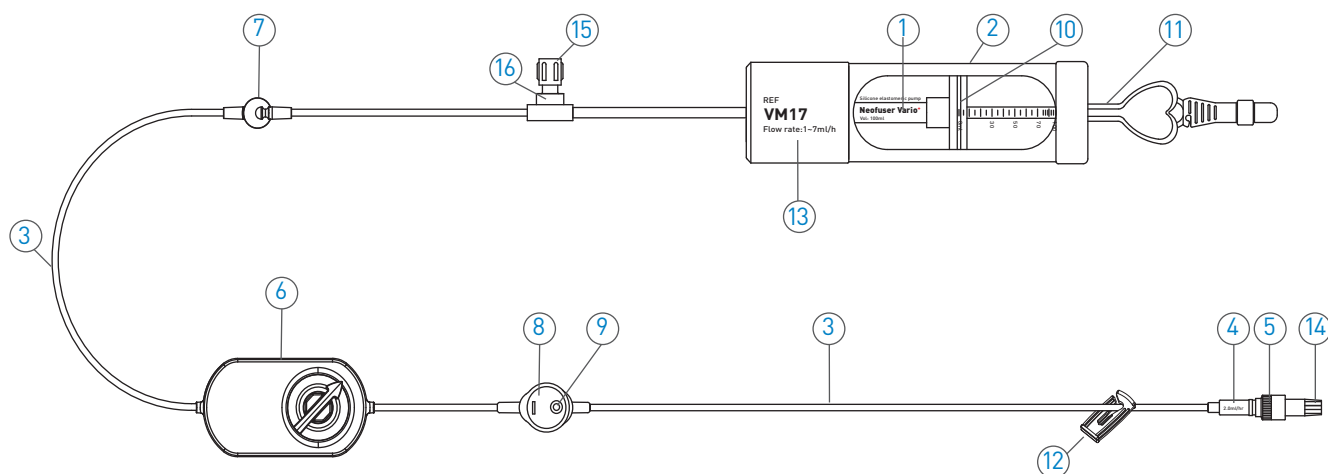

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Elastomerballon | 7. 20 µm partikelfilter | 13. Identifikationsmærkat |
| 2. Hård, gennemsigtig beholder | 8. Partikelfilter | 14. Endehætte |
| 3. Infusionslange | 9. Hul til luftfilter | 15. Låg til fyldningsport |
| 4. Flowbegrænser | 10. Indikator for infusionsstatus | 16. Fyldningsport |
| 5. Luer-lock tilslutning | 11. Luftindgangshul | |
| 6. Flerhastighedsmodul | 12. Klemme | |

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TYPE	VARENUMMER	NOMINEL VOLUMEN (ML)	BASAL FLOWHASTIGHED (ML/T)	ENHEDER/ÆSKE
NEOFUSER®	VM17	100	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	10
	VL17	275	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	10
VARIO PUMPE	VL214	275	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	10

Advarsel: Ikke beregnet til brug med infusioner i det intraartikulære rum.

DET ELLER DE BESKREVNE PRODUKTER ER MULIGVIS IKKE GODKENDT TIL ELLER TILGÆNGELIGE FOR SALG I CANADA OG ANDRE LANDE.

Distribueres af:

Smiths Medical Danmark ApS

Ørestads Boulevard 73

2300 København S, DANMARK

Tel: +45 702 720 90

Email: info.danmark@smiths-medical.com

www.smiths-medical.com

Lokale kontaktoplysninger findes på: www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical er en del af den globale teknologivirksomhed Smiths Group plc. Se brugsanvisningen/brugervejledningen angående en komplet liste over indikationer, kontraindikationer, advarsler og forsigtighedsregler. Designmærket Smiths Medical er et varemærke, der tilhører Smiths Medical. Symbolet ® angiver, at varemærket er registreret hos det amerikanske patent- og varemærkekontor og i visse andre lande. Alle andre nævnte navne og mærker er varemærker eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere. ©2019 Smiths Medical. Alle rettigheder forbeholdes. IN193922DA-032019

MMSPCA-0302

CE 1370 Rx ONLY

smiths medical