



smiths medical
bringing technology to life



Neofuser® Vario

Bomba de infusión elastomérica multiflujo portátil



SEGURIDAD

- Mecanismo cerrado para menor contaminación
- Llave extraíble
- Estabilidad con fármacos
- Compatibilidad biológica
- Cubierta de protección rígida y transparente
- Sin látex ni DEHP

FUNCIONALIDAD

- Flujo ajustable
- Varios volúmenes
- Indicador de volumen de fácil lectura
- Autopurgado
- Baja presión de llenado
- Desechable, portátil y ligera
- Bolsa de transporte para mayor movilidad

RENDIMIENTO


- Flujo exacto y uniforme
- Volumen residual mínimo
- Línea de infusión resistente a los acodamientos

COSTE

- Sin mantenimiento
- No necesita alimentación eléctrica ni pilas

NEOFUSER® VARIO ES ADECUADO EN QUIMIOTERAPIA, PARA ANTIBIÓTICOS Y TODAS LAS ÁREAS DE ANALGESIA POSTOPERATORIA

- Analgesia sistémica
- Bloqueo continuo de plexos
- Anestesia mediante infiltración de la herida

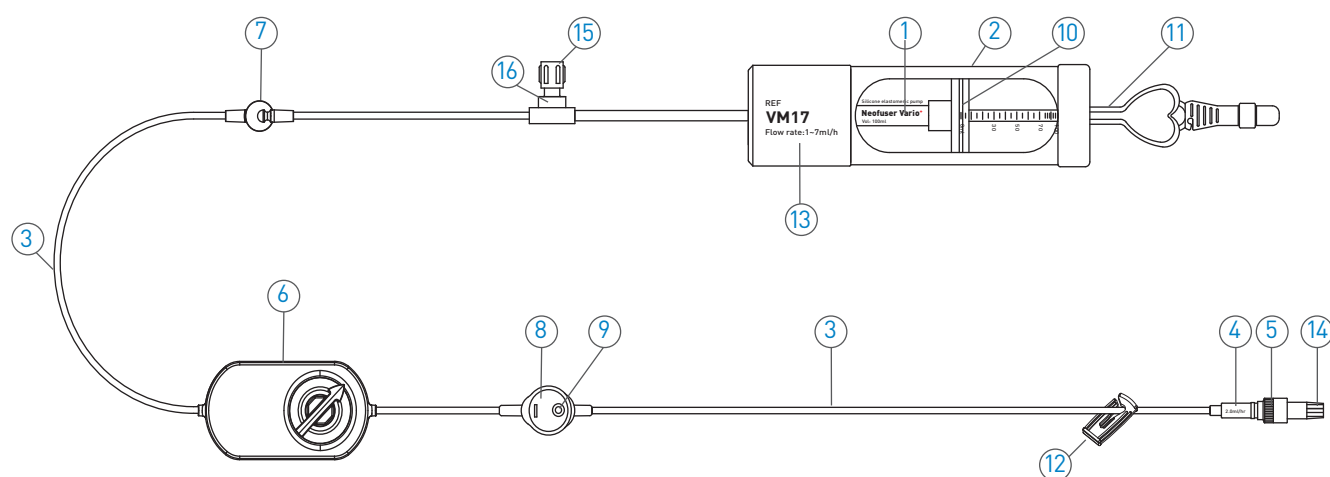

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. Globo elastomérico | 7. Filtro de partículas de 20 µm | 13. Etiqueta de identificación |
| 2. Cubierta transparente rígida | 8. Filtro de partículas | 14. Tapón terminal |
| 3. Línea de infusión | 9. Orificio del filtro de aire | 15. Tapón del puerto de llenado |
| 4. Regulador de flujo | 10. Indicador de progreso de la infusión | 16. Puerto de llenado |
| 5. Conexión Luer lock | 11. Orificio de entrada de aire | |
| 6. Módulo multifiujo | 12. Pinza | |

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TIPO	CÓDIGO DEL PRODUCTO	VOLUMEN NOMINAL (ML)	FLUJO BASAL (ML/H)	UNIDADES/CAJA
NEOFUSER® VARIO	VM17	100	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	10
	VL17	275	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	10
	VL214	275	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	10

Advertencia: No está previsto su uso con infusiones en el espacio intraarticular.

LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES.

Distribuido por:
Smiths Medical España S.r.l.
 Avda. Diagonal 635
 08028, Barcelona
 Tel: +34 93 363 84 00
www.smiths-medical.com

MMSPCA-0302

smiths medical

Puede encontrar la información de su contacto local en www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso o el manual del usuario si desea obtener un listado completo de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. La marca de diseño de Smiths Medical es una marca comercial de Smiths Medical. El símbolo ® indica que la marca comercial está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos y algunos otros países. El resto de los nombres y marcas mencionados son marcas comerciales o de servicio de sus respectivos titulares. ©2018 Smiths Medical. Reservados todos los derechos. IN193922ES-112018