



smiths medical
bringing technology to life



Neofuser® Vario

Diffuseur portable multidébit



SÉCURITÉ

- Mécanisme fermé pour limiter la contamination
- Clé amovible
- Stabilité des médicaments
- Compatibilité biologique
- Contenant protecteur rigide et transparent
- Sans latex ni DEHP

CONVIVALITÉ

- Débit réglable
- Plusieurs tailles de réservoir
- Indicateur de volume facile à lire
- Auto-amorçage
- Remplissage à basse pression
- Jetable, portable et légère
- Sacochette de transport pour les déplacements

PERFORMANCE


- Débit précis et régulier
- Volume résiduel minimal
- Tubulure résistante à la plicature

COÛT

- Aucun entretien
- Fonctionne sans alimentation électrique ni batterie

LA POMPE NEOFUSER® VARIO EST COMPATIBLE AVEC LA CHIMIOTHÉRAPIE, LES ANTIBIOTIQUES ET LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR POSTOPÉRATOIRE

- Prise en charge de la douleur
- Blocage plexique continu
- Anesthésie par infiltration de la plaie

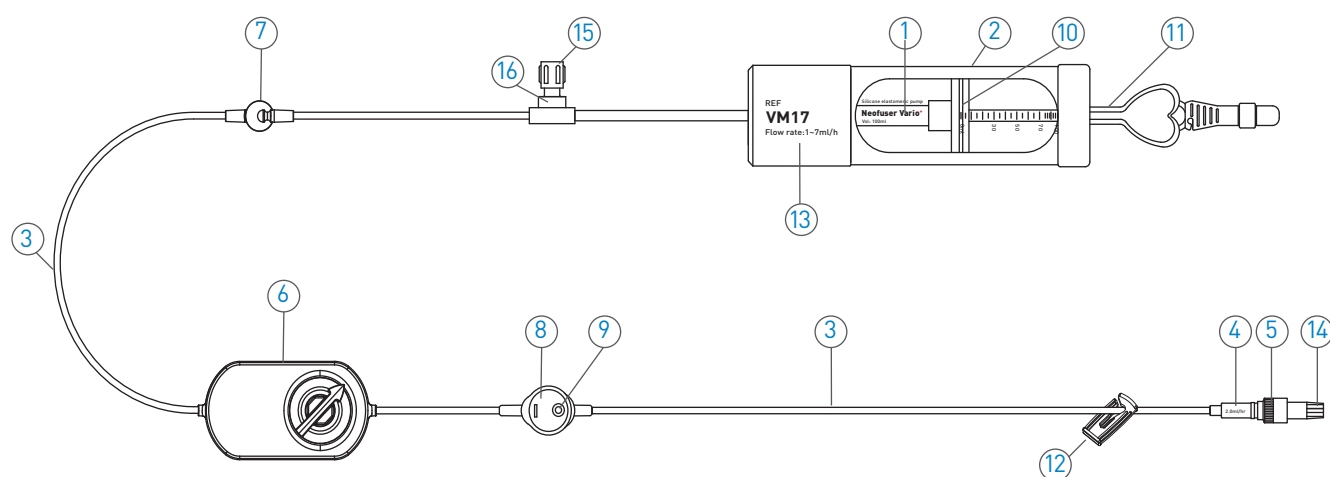

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Ballonnet en élastomère | 7. Filtre à particules 20 µm | 12. Pince |
| 2. Contenant transparent rigide | 8. Filtre à particules | 13. Étiquette d'identification |
| 3. Ligne de perfusion | 9. Orifice de filtre à air | 14. Embout |
| 4. Régulateur de débit | 10. Indicateur de progression de la perfusion | 15. Capuchon du port de remplissage |
| 5. Raccord Luer-Lock | 11. Orifice d'entrée d'air | 16. Port de remplissage |
| 6. Système multidébit | | |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TYPE	CODE PRODUIT	VOLUME (ML)	DÉBIT (ML/H)	UNITÉS/BOÎTE
Neofuser® Vario	VM17	100	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	10
	VL17	275	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	10
Pompe	VL214	275	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	10

Avertissement : Non destinée à être utilisée avec des perfusions dans l'espace intra-articulaire.

LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

Distribué par :

Smiths Medical Belgium S.A.

Pegasuslaan 5

1831 Diegem

Tel.: +32 (0)2 704 49 00

E-mail: belgium@smiths-medical.com

www.smiths-medical.com

Retrouvez les coordonnées de votre interlocuteur local sur www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Se référer aux instructions de la notice d'utilisation/manuel utilisateur pour une description détaillée des produits et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi. Le logo Smiths Medical est une marque commerciale de Smiths Medical. Le symbole ® signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs.

©2018 Smiths Medical. Tous droits réservés. IN193922FRBE-102018

MMSPCA-0302

CE 0434 Rx ONLY

smiths medical