

smiths medical

bringing technology to life



Neofuser® Vario

Pompa elastomerica portatile per infusione a velocità multipla



SICUREZZA

- Meccanismo chiuso per ridurre la contaminazione
- Chiave staccabile
- Stabilità con i farmaci
- Compatibilità biologica
- Contenitore protettivo rigido e trasparente
- Priva di lattice e DEHP

USABILITÀ

- Velocità di flusso regolabile
- Varie dimensioni del serbatoio
- Indicatore del volume facile da leggere
- Autoadescente
- Bassa pressione di riempimento
- Monouso, portatile e leggera
- Borsa da trasporto per la mobilità

PRESTAZIONI


- Velocità di flusso accurata e costante
- Volume residuo minimo
- Tubo anti-attorcigliamento

COSTO

- Senza manutenzione
- Nessun alimentatore o batteria richiesti

LA POMPA NEOFUSER® VARIO È ADATTA PER CHEMIOTERAPIA, ANTIBIOTICI E TUTTE LE AREE DELLA TERAPIA DEL DOLORE POST-OPERATORIO

- Terapia del dolore sistemica
- Blocco continuo del plesso
- Anestesia per infiltrazione delle ferite

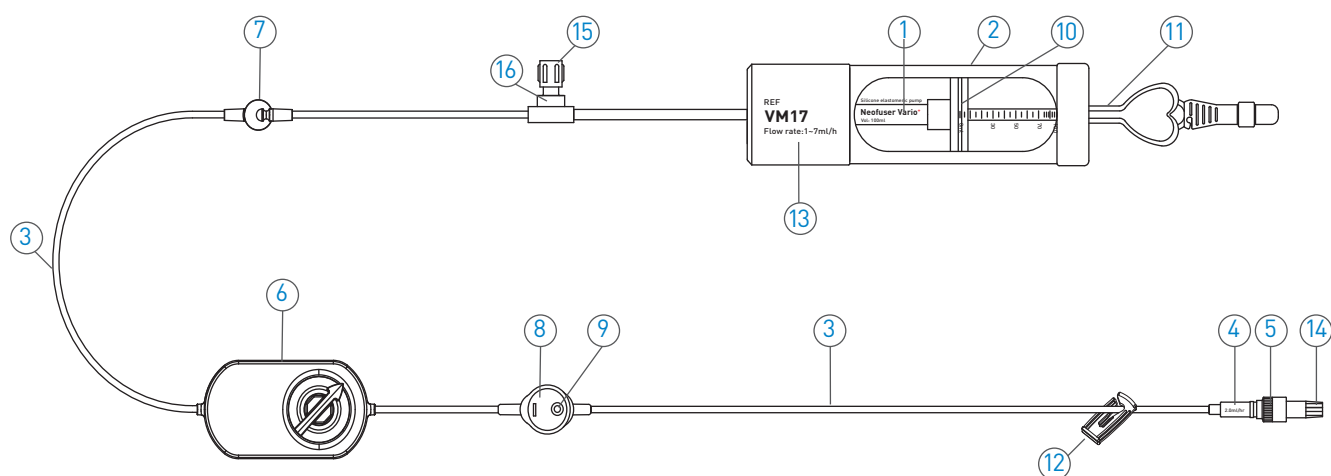

- | | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 1. Palloncino elastomerico | 7. Filtro antiparticolato da 20 µm | 12. Clamp |
| 2. Contenitore trasparente rigido | 8. Filtro antiparticolato | 13. Etichetta di identificazione |
| 3. Linea di infusione | 9. Foro del filtro dell'aria | 14. Cappuccio terminale |
| 4. Limitatore di flusso | 10. Indicatore di avanzamento dell'infusione | 15. Cappuccio della porta di riempimento |
| 5. Connettore Luer Lock | 11. Foro di ingresso dell'aria | 16. Porta di riempimento |
| 6. Modulo multi-velocità | | |

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TIPO	CODICE PRODOTTO	VOLUME NOMINALE (ML)	VELOCITÀ DI FLUSSO BASELE (ML/ORA)	UNITÀ/SCATOLA
Neofuser® Vario Pompa	VM17	100	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	10
	VL17	275	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	10
	VL214	275	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	10

Avvertenza: non destinata all'uso per infusioni nello spazio intrarticolare.

IL PRODOTTO O I PRODOTTI DESCRITTI POTREBBERO NON ESSERE CONCESSI IN LICENZA NÉ DISPONIBILI PER LA VENDITA IN CANADA E IN ALTRI PAESI.

Smiths Medical Deutschland GmbH
Bretonischer Ring 3
85630 Grasbrunn
Tel: +49 (0)89 242959 0
www.smiths-medical.de

Smiths Medical Österreich GmbH
Campus 21, Europaring A 03 5 02
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 (0)1 890 6444 0

Smiths Medical Schweiz AG
Zürichstrasse 33
8134 Adliswil
Tel: +41 (0)43 388 6200

MMSPCA-0302

CE **Rx**
1370 ONLY

Le informazioni di contatto locali sono disponibili all'indirizzo: www.smiths-medical.com/customer-support.

Smiths Medical è parte dell'azienda globale di prodotti tecnologici Smiths Group plc. Consultare le Istruzioni per l'uso o il Manuale dell'operatore per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni. Il marchio di design Smiths Medical è un marchio di Smiths Medical. Il simbolo ® indica che il marchio è registrato presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e di altri Paesi. Tutti gli altri nomi e marchi citati sono marchi di fabbrica o marchi di servizio dei rispettivi titolari.

©2018 Smiths Medical. Tutti i diritti riservati. IN193922ITCH-102018

smiths medical