



smiths medical
bringing technology to life



Neofuser® Vario

Portabel elastomerisk flerhastighetsinfusionspump



SÄKERHET

- Sluten mekanism för mindre kontamination
- Avtagbar nyckel
- Stabil funktion vid läkemedelstillförsel
- Biologisk kompatibilitet
- Rigid och genomskinlig skyddande behållare
- Latex- och DEHP-fri

ANVÄNDBARHET

- Reglerbar flödes hastighet
- Ett flertal reservoarstorlekar
- Lättavläst volymindikator
- Självsugande
- Lågt påfyllnadstryck
- För engångsbruk, portabel och lätt
- Väska för rörlighet

PRESTANDA


- Exakt och konsekvent flödes hastighet
- Minimal residualvolym
- Veck-resistent slangledning

KOSTNAD

- Underhållsfri
- Inget nätaggregat eller batteri behövs

NEOFUSER® VARIO ÄR LÄMPLIG FÖR KEMOTERAPI, ANTIBIOTIKA OCH ALLA OMRÅDEN INOM POST-OPERATIV SMÄRTBEHANDLING

- Systemisk smärtbehandling
- Kontinuerlig plexusblockering
- Sårinfiltrationsbedövning

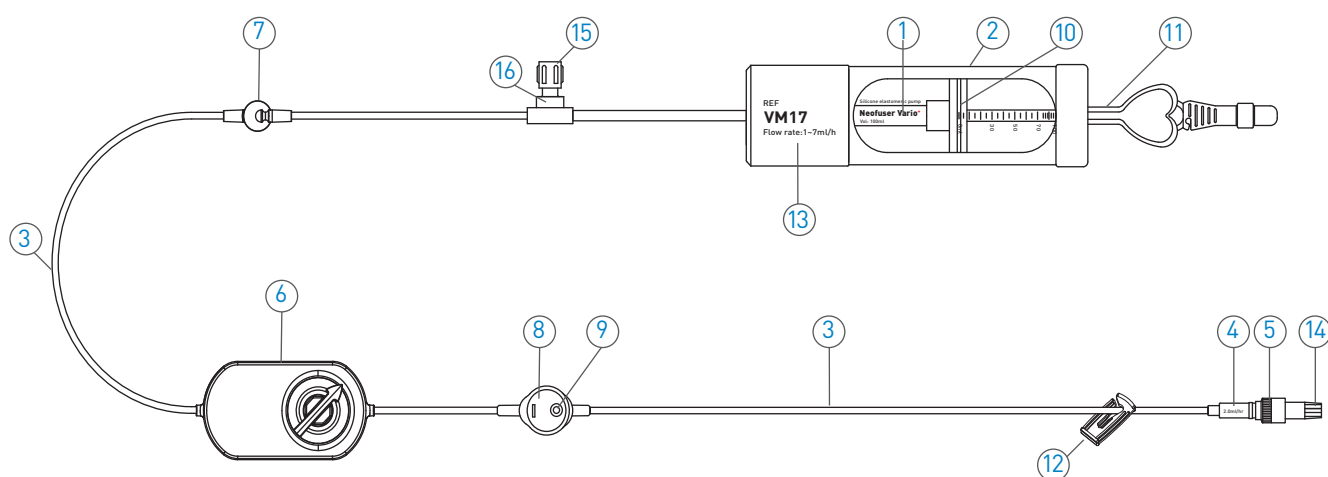

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Elastomerisk ballong | 7. 20 µm partikelfilter | 13. Identifieringsetikett |
| 2. Rigid genomskinlig behållare | 8. Partikelfilter | 14. Ändhatt |
| 3. Infusionsslang | 9. Luftfilterhåll | 15. Lock för påfyllningsöppning |
| 4. Flödesbegränsare | 10. Infusionsprogressindikator | 16. Påfyllningsöppning |
| 5. Luerlockkoppling | 11. Luftinloppshål | |
| 6. Flerhastighetsmodul | 12. Klämman | |

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MODELL	PRODUKTKOD	NOMINELL VOLYM (ML)	BASFLÖDESHASTIGHET (ML/H)	ENHETER/FÖRPACKNING
Neofuser® Vario Pump	VM17	100	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	10
	VL17	275	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	10
	VL214	275	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	10

Varning: Inte avsedd för användning med infusioner i det intraartikulära utrymmet.

PRODUKTERNA SOM BESKRIVS KANSKE INTE LICENSIERAS ELLER SÄLJS I KANADA OCH ANDRA LÄNDER.

Distribueras av:
Smiths Medical Sverige AB
 Box 1143
 164 22 Kista, SVERIGE
 Tel: 08-594 772 50
www.smiths-medical.com

Du hittar lokala kontaktpuppgifter på: www.smiths-medical.com/customer-support.

Smiths Medical är en del av den globala teknikverksamheten Smiths Group plc. Se bruksanvisningen/användarhandboken för en komplett lista över indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder. Smiths Medical designmärke är ett varumärke som tillhör Smiths Medical. Symbolen © anger att varumärket är registrerat hos det amerikanska patent- och registreringsverket samt i vissa övriga länder. Alla andra namn och märken som omnämns är varumärken eller servicemärken som tillhör respektive ägare. ©2019 Smiths Medical. Med ensamrätt. IN193922SV-022019

MMSPCA-0302

smiths medical