

smiths medical  
bringing technology to life

## Neofuser® Vario

Taşınabilir Elastomerik Değişken Hıza Sahip  
İnfüzyon Pompası



## GÜVENLİK

- Daha az kontaminasyon için kapalı mekanizma
- Ayrılabilir anahtar
- İlaç ile stabilite
- Biyolojik uyumluluk
- Sert ve şeffaf koruyucu kap
- Lateks ve DEHP içermez

## KULLANILABİLİRLİK

- Ayarlanabilir akış hızı
- Farklı rezervuar boyutları
- Kolay okunabilir hacim göstergesi
- Kendinden emişli
- Düşük doldurma basıncı
- Tek kullanımlık, taşınabilir ve hafif
- Rahat taşıyabilmek için bir taşıma çantası

## PERFORMANS


- Doğru ve tutarlı akış hızı
- Minimum kalıntı hacmi
- Kolay bükülmeyen boru sistemi

## MALİYET

- Bakım gerektirmeyen
- Güç kaynağı veya pil gerektirmez

## NEOFUSER® VARIO KEMOTERAPİ, ANTİBİYOTİKLER VE POSTOPERATİF AĞRI TERAPİSİNİN TÜM ALANLARI İÇİN UYGUNDUR

- Sistemik ağrı tedavisi
- Sürekli pleksus bloğu
- Yara infiltrasyonu anestezisi

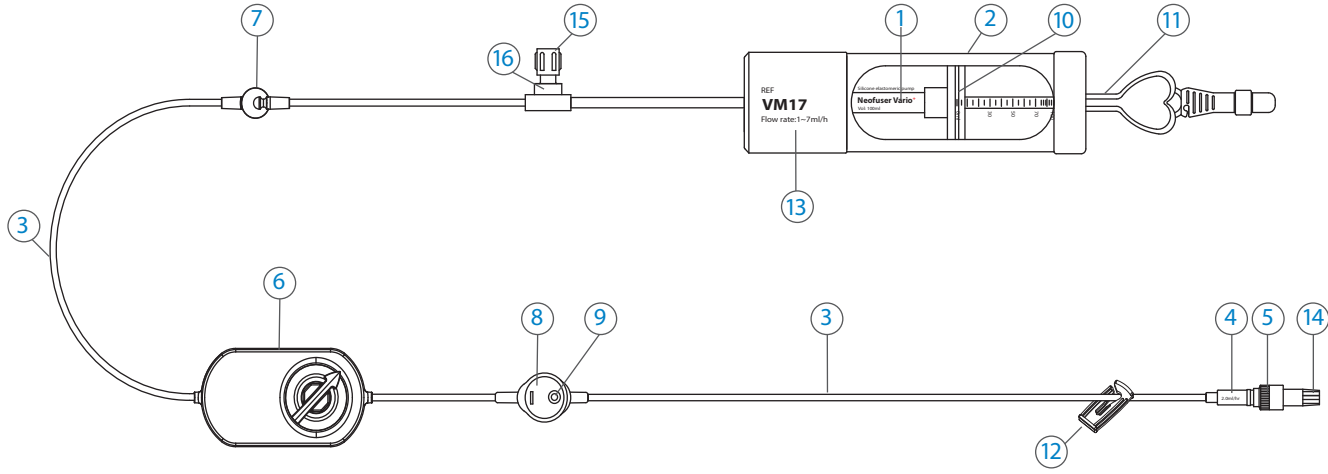

1. Elastomerik Balon
2. Sert şeffaf kap
3. İnfüzyon hattı
4. Akış sınırlayıcı
5. Luer kilit konnektörü
6. Değişken hıza sahip modül
7. 20 µm partikül filtresi
8. Partikül filtresi
9. Hava filtresi deliği
10. İnfüzyon ilerleme göstergesi
11. Hava giriş deliği
12. Kelepçe
13. Kimlik etiketi
14. Uç kapağı
15. Doldurma bağlantı noktası kapağı
16. Doldurma bağlantı noktası

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİP	ÜRÜN KODU	NOMİNAL HACİM (ML)	BAZAL AKIŞ HIZI (ML/SAAT)	BİRİMLER/KUTU
Neofuser® Vario	VM17	100	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	10
	VL17	275	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	10
Pompa	VL214	275	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	10

Uyarı: Eklem içi boşlukta infüzyon ile kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

BELİRTİLEN ÜRÜN(LER), KANADA VE DİĞER ÜLKELERDE LİSANS SAHİP OLMAYABİLİR VEYA SATILMAYABİLİR.

### Dağıtımı yapan:

### Smiths Medical International Ltd.

Dubai Airport Free Zone  
Building 4 E, Block A, Office 722  
P O Box 54862  
Dubai, United Arab Emirates  
www.smiths-medical.com

Yerel iletişim bilgilerinizi şu adreste bulabilirsiniz: www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical, global teknoloji şirketi Smiths Group plc'nin bir parçasıdır. Endikasyonları, kontraendikasyonları, uyarıları ve önlemleri tam olarak listelemek için Kullanım Talimatlarına/Kullanma Kılavuzuna bakın. Smiths Medical tasarım işareti Smiths Medical ticari markasıdır. ® sembolü ticari markanın ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi ve bazı diğer ülkelerde tescilli olduğuna işaret eder. Adı geçen tüm diğer isimler ve işaretler ilgili sahiplerinin ticari markaları veya servis işaretleridir. ©2018 Smiths Medical. Tüm hakları saklıdır. IN193922TR-112018

MMSPCA-0302

CE  
1370  
Rx  
ONLY

smiths medical