

smiths medical

bringing technology to life



**Lanceta de segurança
Safe-T-Lance® Plus –
ativação com botão**

Segura. Confortável. Eficaz.



3 PASSOS SIMPLES



1. Rode a tampa protetora e retire-a a direito.



2. Pressione firmemente o corpo da lanceta de segurança Safe-T-Lance® Plus contra o local de punção e prima o botão para ativar o dispositivo.



3. Com cuidado, aplique pressão intermitente junto ao local da punção para obter o volume de sangue necessário.

ADVERTÊNCIA: Não utilize se a tampa protetora tiver sido anteriormente removida da lanceta. Limpe a pele em conformidade com os procedimentos de segurança. Elimine a lanceta usada num recipiente para objetos afiados em conformidade com as diretrizes da instituição e os regulamentos locais e nacionais aplicáveis.

FUNCIONALIDADES E BENEFÍCIOS

SEGURANÇA


- De uso único
- Retração e bloqueio automáticos da agulha
- Prevenção de lesão por picada de agulha e infecção cruzada

EFICÁCIA

- Ampla gama de produtos – disponíveis em 6 tamanhos diferentes
- Colhe a quantidade certa de sangue para diferentes testes capilares

CONFORTO

- Fácil de utilizar em apenas três passos
- Concebida para controlar a profundidade da agulha
- Ação de mola dupla
- Agulhas revestidas com silicone
- Punho ergonómico para manuseamento preciso

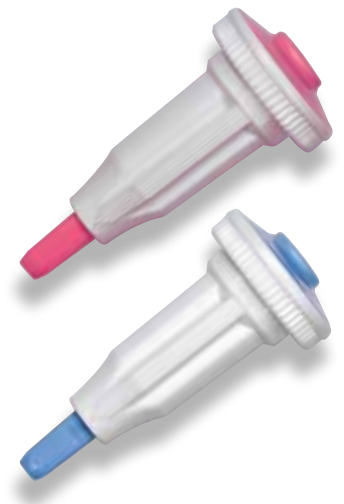

Lanceta Safe-T-Lance® Plus

	Pediátrico 1028-1	Lâmina de 1,5 mm	1,2 mm de profundidade		Fluxo normal 1014-1	Agulha 21G	1,8 mm de profundidade
	Fluxo máx. 1005-1	Lâmina de 1,5 mm	1,6 mm de profundidade		Fluxo reduzido 1020-1	Agulha 25G	1,4 mm de profundidade
	Fluxo elevado 1008-1	Agulha 18G	1,8 mm de profundidade		Microfluxo 1025-1	Agulha 28G	1,6 mm de profundidade

Quantidade para encomenda: 200 unidades/embalagem, 2000 unidades/caixa

DRAFT MATERIAL

Para obter mais informações, visite o nosso website: www.smiths-medical.com

OS PRODUTOS DESCRITOS PODEM NÃO ESTAR LICENCIADOS OU PODEM NÃO ESTAR DISPONÍVEIS PARA VENDA NO CANADÁ OU NOUTROS PAÍSES

Distribuído por:

Smiths Medical ASD, Inc.
Keene, NH 03431, EUA
Telefone: 1-603-352-3812
Linha gratuita nos EUA: 1-800-258-5361

Smiths Medical Portugal Lda

Av. Eng. Duarte Pacheco,
Amoreiras, Torre 2 15º A
1070-102 Lisboa
Telefone: +351 22 532 30 10

Fabricado por:

HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków POLÓNIA

MKEECA-0094

CE
0473 **Rx**
ONLY

smiths medical

As informações de contacto locais estão disponíveis em: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical faz parte da atividade tecnológica global da Smiths Group plc. Para uma listagem completa das indicações, contraindicações, advertências e precauções, consulte as instruções de utilização/manual do operador. Jelco e o logótipo da Smiths Medical são marcas comerciais da Smiths Medical. Safe-T-Lance é uma marca comercial registada da HTL-STREFA S.A. utilizada com autorização. ©2016 Smiths Medical. Tutti i diritti riservati. SS195429PT-122016